


OGÓLNA SPECYFIKACJA WORKÓW NA KREW LAISHI

POJEDYNCZY WOREK NA KREW

- Składa się z jednego plastyfikowanego worka PVC zawierającego roztwór antykoagulantu
- Przeznaczone do pobierania i przechowywania pełnej krwi ludzkiej

Rozmiar i specyfikacja techniczna

Numer referencyjny	Pojemność torby (ml)	Rozmiar igły	Antykoagulant		Opakowanie Torba/Karton
			Typ	Ilość	
S-250C	250	16G	CPDA-1	35ml	5/100
S-350C	350	16G	CPDA-1	49ml	5/100
S-450C	450	16G	CPDA-1	63ml	5/100
S-500C	500	16G	CPDA-1	70ml	5/100
S-***CX	*** Refers to size; "X" refers to with needle protector, sample pouch, collection				

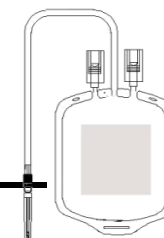

PODWÓJNY WOREK NA KREW

- Składa się z jednego worka do pobierania krwi pełnej zawierającego roztwór antykoagulantu i 1 pojemnika satelitarnego.
- Służy do oddzielania i przechowywania dwóch składników z pełnej krwi ludzkiej w sterylnym, zamkniętym środowisku.

- Rozdziela krew pełną na dwie części po odwirowaniu:

- 1) Krwinki czerwone opakowane, 2) Osocze

Rozmiar i specyfikacja techniczna

Numer referencyjny	Pojemność worka(ml)	Rozmiar igły	Antykoagulant		Opakowanie Torba/Karton
			Typ	Ilość	
D-250C	250/200	16G	CPDA-1	35ml	4/80
D-350C	350/300	16G	CPDA-1	49ml	4/80
D-450C	450/300	16G	CPDA-1	63ml	4/80
D-500C	500/300	16G	CPDA-1	70ml	4/80
D-***CX	*** Refers to size; "X" refers to with needle protector, sample pouch, collection				



POTRÓJNY WOREK NA KREW


- Składa się z jednego worka do pobierania krwi pełnej zawierającego roztwór antykoagulantu i 2 worków satelitarnych. Służy do oddzielania i przechowywania trzech składników z pełnej krwi ludzkiej w sterylnym, zamkniętym środowisku.

- Rozdziela krew pełną na trzy części po odwirowaniu:

- 1) krwinki czerwone, 2) osocze, 3) płytki krwi

Rozmiar i specyfikacja techniczna

Numer referencyjny	Pojemność worka(ml)	Rozmiar igły	Antykoagulant		Opakowanie Torba/Karton
			Typ	Ilość	
T-250C	250/200*2	16G	CPDA-1	35ml	4/60
T-350C	350/300*2	16G	CPDA-1	49ml	4/60
T-450C	450/300*2	16G	CPDA-1	63ml	4/60
	450/400*2				
T-500C	500/300*2	16G	CPDA-1	70ml	4/60
	500/400*2				
T-350S	350/300*2	16G	CPD-SAGM	49/78ml	2/50
T-450S	450/300*2	16G	CPD-SAGM	63/100ml	2/50
	450/400*2				
T-500S	500/300*2	16G	CPD-SAGM	70/111ml	2/50
	500/400*2				
T-***CX(T-***SX) *** Refers to size; "X"refers to with needle protector, sample pouch, collection					

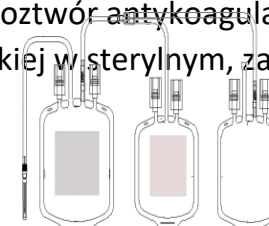

POCZWÓRNY WOREK NA KREW

- Składa się z jednego worka do pobierania krwi pełnej zawierającego roztwór antykoagulantu i 3 pojemników satelitarnych.
- Używany do oddzielania i przechowywania czterech składników z pełnej krwi ludzkiej w sterylnym, zamkniętym środowisku.
- Rozdzielają krew pełną na cztery części po odwirowaniu:

- 1) koncentrat krwinek czerwonych, 2) osocze, 3) płytki krwi, 4) krioprecypitat

Rozmiar i specyfikacja techniczna

Numer referencyjny	Pojemność worka(ml)	Rozmiar igły	Antykoagulant		Opakowanie Torba/Karton
			Typ	Ilość	
Q-250C	250/200*3	16G	CPDA-1	35ml	4/60
Q-350C	350/300*3	16G	CPDA-1	49ml	4/60
Q-450C	450/300*3	16G	CPDA-1	63ml	4/60
	450/400*3				
Q-500C	500/300*3	16G	CPDA-1	70ml	4/60
	500/400*3				

OGÓLNA SPECYFIKACJA WORKÓW NA KREW LAISHI					
Q-350S	350/300*3	16G	CPD-SAGM	49/78ml	2/50
Q-450S	450/300*3	16G	CPD-SAGM	63/100ml	2/50
	450/400*3				
Q-500S	500/300*3	16G	CPD-SAGM	70/111ml	2/50
	500/400*3				
T-***CX(T-***SX) *** Refers to size; "X"refers to with needle protector, sample pouch, collecti					

WOREK TRANSFEROWY

- Używany do pobierania i przechowywania jednego z komponentów krwi.
- Może być używany zamiast worka satelitarnego.
- Z kolcem lub bez.

Rozmiar i specyfikacja techniczna			
Numer Nreferencyjny	Pojemność worka(ml)	Rozmiar igły	Opakowanie Karton
TR-150	150	with or without	200
TR-250	250		200
TR-350	350		150
TR-450	450		150

FILTR REDUKUJĄCY LEUKOCYTY

- System filtrów redukujących leukocyty jest przeznaczony do redukcji białych krwinek w koncentratkach krwinek czerwonych krwi pełnej, zapobiegając wielu złym reakcjom podczas transfuzji i redukując implantan
- gospodarza i chorób wirusowych z białych krwinek innych niż własne.
- Redukcja liczby leukocytów $\geq 99,9\%$, pozostałe białe krwinki $\leq 2,5 \times 10^6$ /jednostkę
- Odzysk czerwonych krwinek $\geq 85\%$.

Rozmiar i specyfikacja techniczna					
Numer referencyjny	Obudowa filtra	Pojemność worka (ml)	Antykoagulant		Opakowanie Torba/Karton
			Typ	Ilość	
TA-RFA 250	Szttywna obudowa	250*1	N/A		3/60
TA-RFA 450		450*1			3/60
TA-RFB T350	Szttywna obudowa	250*1 + 200 *3	CPD-SAGM	49/78ml	2/40
TA-RFB T450		450*1 + 300 *3	CPD-SAGM	63/100ml	2/40
TA-RFB Q350		250*1 + 200 *4	CPD-SAGM	49/78ml	2/40
TA-RFB Q450		450*1 + 300 *4	CPD-SAGM	63/100ml	2/40
TA-RFC T350	Miękka obudowa	250*1 + 200 *3	CPD-SAGM	49/78ml	2/40
TA-RFC T450		450*1 + 300 *3	CPD-SAGM	63/100ml	2/40
TA-RFC Q350		250*1 + 200 *4	CPD-SAGM	49/78ml	2/40
TA-RFC Q450		450*1 + 300 *4	CPD-SAGM	63/100ml	2/40



OGÓLNA SPECYFIKACJA WORKÓW NA KREW LAISHI

CECHY JAKOŚCIOWE

- Przeznaczony do pobierania, przechowywania, przetwarzania i transportu krwi ludzkiej i jej składników.
- Wykonany z wysokiej jakości i plastyfikowanego PVC klasy medycznej, kompatybilnego z krwią, posiadającego właściwości i takie jak nietoksyczność, przezroczystość, elastyczność, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, odporność na ciepło i zimno.
- Ultra cienka igła do nakłuwania żył 16G jest optymalna dla zmniejszenia bólu u dawcy.
- Doskonała osłona igły typu twist-off sprawia, że igła nie nadaje się do ponownego użycia.
- Wysoka elastyczność i odporność na zginanie probówki do pobierania krwi za pomocą numerów seryjnych umożliwiającą precyzyjną i łatwą identyfikację.
- Konstrukcja za pomocą manewrowania umożliwia łatwe otwieranie przewodów doprowadzających płyn pomiędzy workami.
- Konstrukcja bezpiecznego i łatwego do otwarcia portu wylotowego zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniem.
- Wysockiej jakości, odporna na odklejenie etykieta zapewnia wygodny zapis.
- Podwójne opakowanie (indywidualne i aluminiowe) eliminuje ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego na powierzchni i utrzymuje wartość antykoagulantów.
- Sterylizacja parą wodną pod wysokim ciśnieniem zapewnia, że produkty są wolne od pirogenów i toksyn.
- Typ wytłaczania i spawania rolki typu worki krwi mogą za spokojić różne żądania klientów.

OPCJONALNE ELEMENTY

Dostępny antykoagulant CPDA-1/CPD/SAG-M

Ochroniacz igły

Osłona zapobiegająca zakłuciom zapobiega przypadkowemu zakłuciu igłą, osłaniając igłę dawcy po usunięciu wkłucia.

Port pobierania próbek


Igła do pobierania próbek z dołączonym uchwytem do probówek próżniowych ułatwia pobieranie próbek krwi.

Worek na próbki

Woreczek do pobierania próbek jest dostępny w celu pobrania pierwszego strumienia krwi od dawcy, aby zapobiec miejscowemu zanieczyszczeniu.

Torba na płytki krwi

Wysokiej jakości folia nadająca się do przedłużonego przechowywania żywych płytek krwi przez około 5 dni.

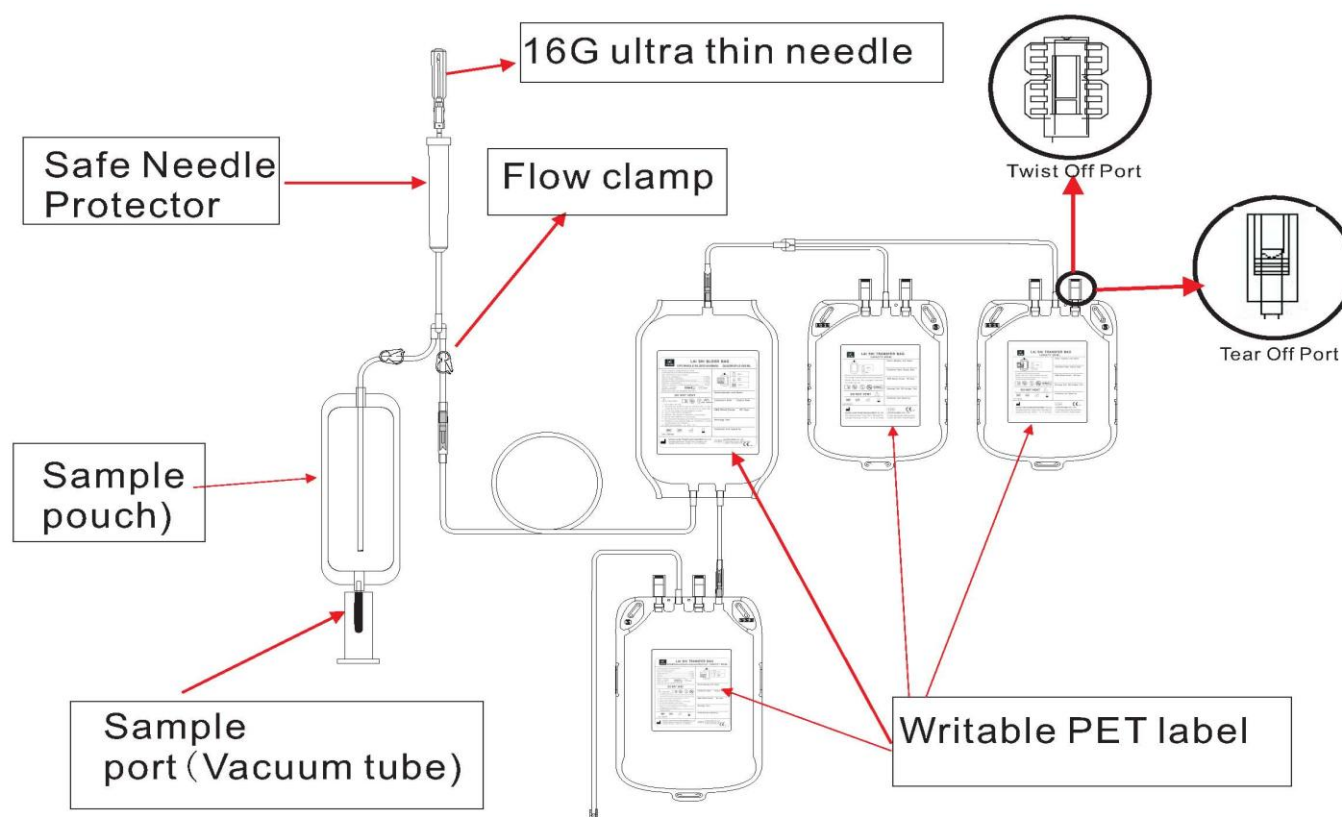

OGÓLNA SPECYFIKACJA WORKÓW NA KREW LAISHI

Roztwory antykoagulantów stosowane w worku na krew

Rozwiązanie	Przeznaczenie	Krew pełna lub krwinki czerwone Okres przechowywania	Koncentracje dodatków (na 100ml)	Wydajność
CPD	Antykoagulacja i przechowywanie krwi	21 days	Citric Acid (Anhydrous) Sodium Citrate (Dihydrate) Monobasic Sodium Phosphate (Monohydrate) Dextrose (Monohydrate) Water for injection	0.299 g • Zapobieganie krzepnięciu krwi 2.63 g • Regulacja pH 0.222 g • Źródło pożywienia dla krwinek czerwonych 2.55 g • Wspomaga produkcję ATP q.s. 100 ml
CPDA 1	Antykoagulacja i przechowywanie krwi	35 days	Citric Acid (Anhydrous) Sodium Citrate (Dihydrate) Monobasic Sodium Phosphate (Monohydrate) Dextrose (Monohydrate) Adenine Water for injection	0.299 g • Zapobieganie krzepnięciu krwi 2.63 g • Regulacja pH 0.222 g • Źródło pożywienia dla krwinek czerwonych 3.19 g • Wspomaganie produkcji ATP 0.0275 g • Wspomaga utrzymanie poziomu ATP q.s. 100 ml w krwinkach czerwonych
SAGM	Konserwacja krwinek czerwonych	42 days	Dextrose (monohydrate) Sodium chloride Adenine D-mannitol Water for injection	0.900 g • Źródło pożywienia dla czerwonych krwinek 0.877 g • Reguluje ciśnienie osmotyczne 0.0169 g • Wspomaga utrzymanie poziomu ATP q.s. 100 ml w krwinkach czerwonych 0.525 g • Wspomaga integralność czerwonych krwinek